

単品	製品名	入数	価格
ニードル	サージエリーニードル ライト	1個	43,600円
	サージエリーニードル レフト		
	NiTi メモリーシェーブニードル2	1個	50,200円
	クラシックニードル		
リフィル	プラスチックブランジャー	16本	10,600円
	クリーニングキュレット		
	クリーニングデバイス	50個	11,300円

● #90 Ø0.90 mm ● #110 Ø1.10 mm ● #130 Ø1.30 mm

セット品	MAP ONE システム	イントロキット2	ユニヴァーサル キット
NiTi メモリーシェーブニードル2 イエロー #90	● (1個)	● (1個)	● (1個)
NiTi メモリーシェーブニードル2 レッド #110	● (1個)	● (1個)	● (1個)
NiTi メモリーシェーブニードル2 ブルー #130	● (1個)	● (1個)	● (1個)
クラシックニードル イエロー #90		● (1個)	● (1個)
クラシックニードル レッド #110		● (1個)	● (1個)
プラスチックブランジャー イエロー #90		● (8本)	● (16本)
プラスチックブランジャー レッド #110	● (8本)	● (8本)	● (16本)
プラスチックブランジャー ブルー #130		● (8本)	● (8本)
クリーニングキュレット イエロー #90		● (1本)	● (1本)
クリーニングキュレット レッド #110	● (1本)	● (1本)	● (1本)
クリーニングキュレット ブルー #130		● (1本)	● (1本)
クリーニングデバイス イエロー #90		● (1セット)	● (1セット)
クリーニングデバイス レッド #110		● (1セット)	● (1セット)
クリーニングデバイス ブルー #130		● (1セット)	● (1セット)
ステンレスシリンジ	● (1本)	● (1本)	● (1本)
ステンレススチールウェル		● (1個)	● (1個)
滅菌用アルミニウムケース		● (1個)	● (1個)
価格	84,000円	155,000円	222,000円


MTAセメント専用キャリアー

MAP SYSTEM

MICRO - APICAL PLACEMENT

歯科用注入器具 MAPシステム

充填シーンをスマートに

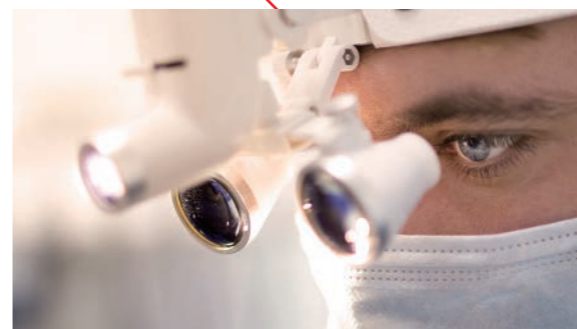

MAP SYSTEMはスイス製のMTAセメント充填用キャリアーです。

スタンダードなクラシックニードル

逆根管充填に適したサージエリーニードル

形状記憶合金によって自由に形状を変えられるNiTiメモリーシェーブニードル2

症例に合わせて形状で充填シーンに応えます

TMR MTA cement Mielle

管理医療機器 歯科用覆髄材料
認証番号: 231AABZX00017000



ホワイトとライトアイボリーの2色をラインアップ!



ラインアップ

製品名	容量	付属品	価格
TMR-MTAセメント	0.2g×3本		3,600円
Mielle	3g	スプーン(1本)	7,500円
(ホワイト/ライトアイボリー)	10g	点眼容器(1個)	15,000円
ガラス練板	1枚		700円

※点眼容器に精製水は入っておりません。

【適応】

非感染歯髄で、窩洞形成や外傷によって偶発的に生じた2mm以内の露髄に用いる。

製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

YAMAKIN株式会社

販売元(正規代理店) (MAPシステム) 〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
製造販売元(TMR-MTAセメントミエール) 〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知 製品に関するお問い合わせ (9:00~17:00)
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室 テクニカルサポート ユーザー ヨクツク
https://www.yamakin-gold.co.jp ☎ 0120-39-4929

お取扱店



Swiss quality dental products



Classic Needles

クラシックニードルは直接覆髄や歯冠側からの充填に適しています。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm
- #110 Ø1.10mm

適応：

- 覆髄 ■ 穿孔 ■ 根尖閉鎖術



NiTi Memory Shape Needles2

NiTiメモリーシェーブニードル2は形状記憶合金のため、症例に合わせた形状に曲げて使用できます。
オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm
- #110 Ø1.10mm
- #130 Ø1.30mm

適応：

- 覆髄 ■ 穿孔 ■ 根尖閉鎖術
- 逆根管充填 ■ 歯根吸収



Surgery Needles




サージェリーニードルは逆根管充填の際、根尖部への充填に適しています。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm (left or right)
- #110 Ø1.10mm (left or right)

適応：


- 逆根管充填 ■ 歯根吸収

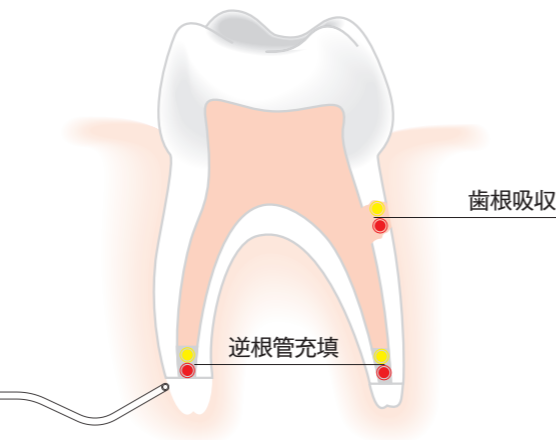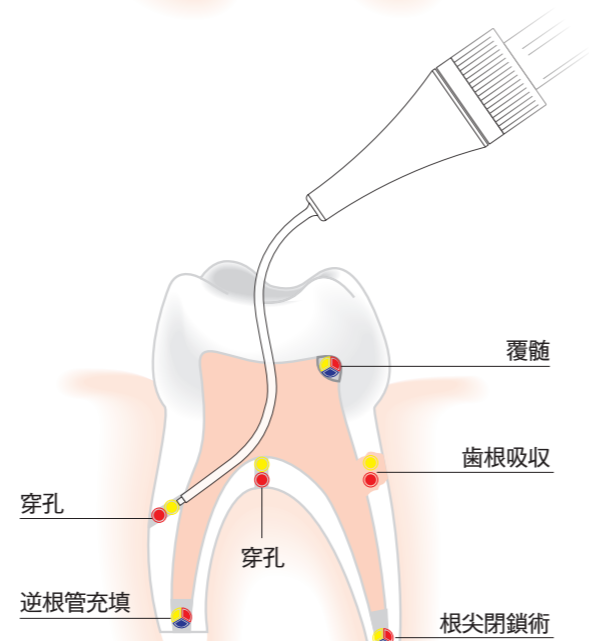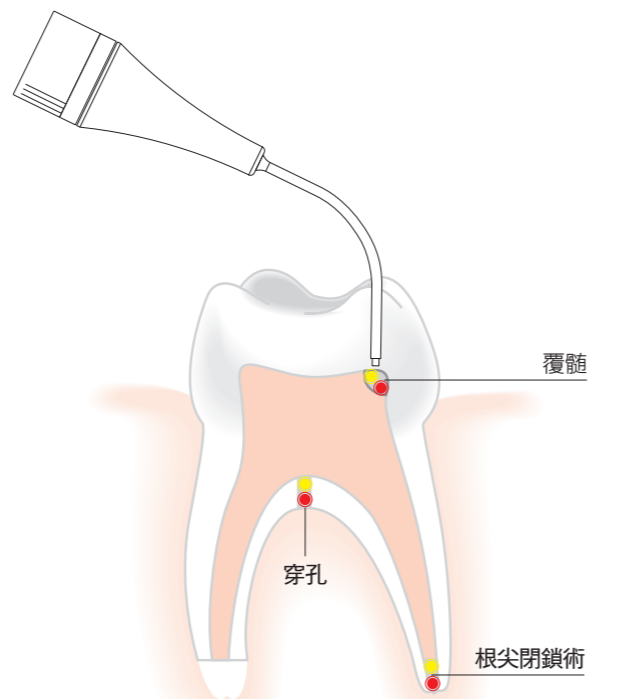

Needles

クラシックニードル Classic Needles

直接覆髄など、歯冠側からの充填に適しています。

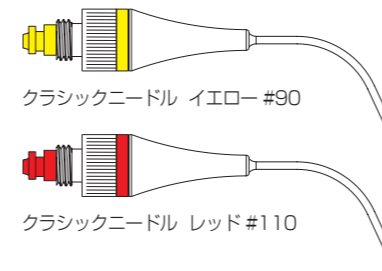


クラシックニードル イエロー #90

クラシックニードル レッド #110

NiTiメモリーシェーブニードル2 NiTi Memory Shape Needles2

形状記憶合金のため、症例に合わせた形状に曲げて使用できます。オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。

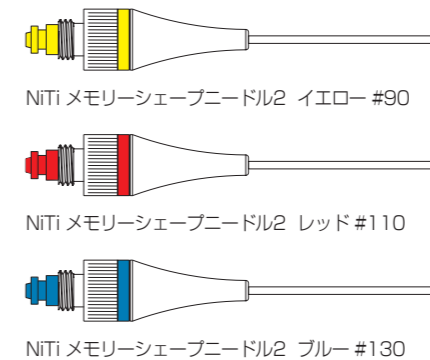


NiTiメモリーシェーブニードル2 イエロー #90

NiTiメモリーシェーブニードル2 レッド #110

NiTiメモリーシェーブニードル2 ブルー #130

サージェリーニードル Surgery Needles

逆根管充填の際、根尖部への充填に適しています。

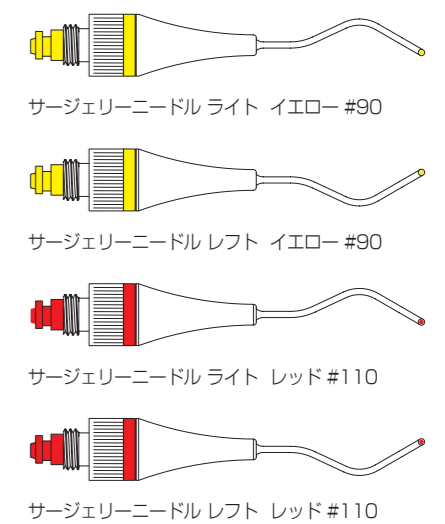

サージェリーニードル ライト イエロー #90

サージェリーニードル レフト イエロー #90

サージェリーニードル ライト レッド #110

サージェリーニードル レフト レッド #110



包装内容 ニードル …………… 1個
プラスチックプランジャー …… 8本
クリーニングキュレット …… 1本

Refills

それぞれのニードルと同じ#のものをご使用ください。

プラスチックプランジャー Plastic Plungers

ニードル内のセメントを押し出すツールです。



プラスチックプランジャー イエロー #90

プラスチックプランジャー レッド #110

プラスチックプランジャー ブルー #130

クリーニングデバイス Cleaning Device

ニードルの外についた余剰なセメントを取り除くツールです。




クリーニングデバイス イエロー #90

クリーニングデバイス レッド #110

クリーニングデバイス ブルー #130

クリーニングキュレット Cleaning Curette

使用後のニードル内を清掃するためのツールです。

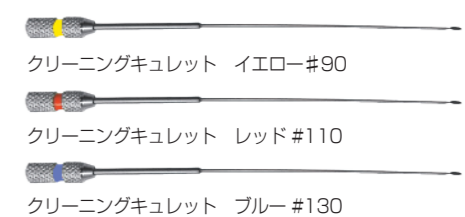

クリーニングキュレット イエロー #90

クリーニングキュレット レッド #110

クリーニングキュレット ブルー #130




滅菌用 アルミニウムケース

Aluminum Sterilization Case

専用ケースはケースごとオートクレーブ滅菌が可能です。

MAPシステム
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号: 13B1X10089000986
MAPシステム イントロキット2
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号: 13B1X10089001060
MAP ONEシステム
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号: 13B1X10089001063
MAPシステム ユニヴァーサルキット
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号: 13B1X10089001067

製造販売元(輸入者) (MAPシステム)
MICRO MITECH 株式会社
マイクロテック 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

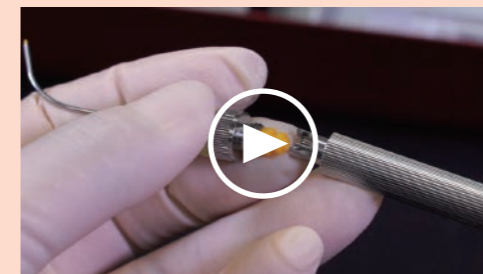

操作説明を動画で

MAPシステムの特徴と操作手順を動画でご説明しています。

YAMAKIN 歯科

検索

