


単品	製品名	入数	価格
ニードル	サージエリーニードル ライト	1個	43,600円
	サージエリーニードル レフト		
	NiTi メモリーシェーブニードル2	1個	50,200円
	クラシックニードル		
リフィル	プラスチックブランジャー	16本	10,600円
	クリーニングキュレット		
	クリーニングデバイス	50個	11,300円

● #90 Ø0.90 mm ● #110 Ø1.10 mm ● #130 Ø1.30 mm

セット品	MAP ONE システム	イントロキット2	ユニヴァーサル キット
NiTi メモリーシェーブニードル2 イエロー #90	● (1個)	● (1個)	● (1個)
NiTi メモリーシェーブニードル2 レッド #110	● (1個)	● (1個)	● (1個)
NiTi メモリーシェーブニードル2 ブルー #130	● (1個)	● (1個)	● (1個)
クラシックニードル イエロー #90		● (1個)	● (1個)
クラシックニードル レッド #110		● (1個)	● (1個)
プラスチックブランジャー イエロー #90		● (8本)	● (16本)
プラスチックブランジャー レッド #110	● (8本)	● (8本)	● (16本)
プラスチックブランジャー ブルー #130		● (8本)	● (8本)
クリーニングキュレット イエロー #90		● (1本)	● (1本)
クリーニングキュレット レッド #110	● (1本)	● (1本)	● (1本)
クリーニングキュレット ブルー #130		● (1本)	● (1本)
クリーニングデバイス イエロー #90		● (1セット)	● (1セット)
クリーニングデバイス レッド #110		● (1セット)	● (1セット)
クリーニングデバイス ブルー #130		● (1セット)	● (1セット)
ステンレスシリンジ	● (1本)	● (1本)	● (1本)
ステンレススチールウェル		● (1個)	● (1個)
滅菌用アルミニウムケース		● (1個)	● (1個)
価格	79,000円	145,200円	221,800円

TMR MTA cement Mielle

管理医療機器 歯科用覆髄材料
認証番号：231AABZX00017000

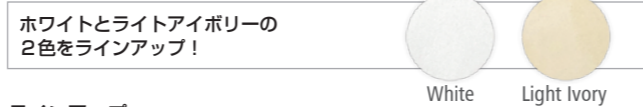

ラインアップ

製品名	容量	付属品	価格
TMR-MTAセメント	0.2g×3本		3,600円
Mielle (ホワイト/ライトアイボリー)	3g	スプーン(1本)	7,500円
	10g	点眼容器(1個)	15,000円
ガラス練板	1枚		700円

※点眼容器に精製水は入っておりません。
【適応】非感染歯髄で、窩洞形成や外傷によって偶発的に生じた2mm以内の露髄に用いる。

製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

YAMAKIN株式会社

販売元(正規代理店) (MAPシステム) 〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
製造販売元(TMR-MTAセメントミエール) 〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
https://www.yamakin-gold.co.jp

製品に関するお問い合わせ (9:00~17:00)
テクニカルサポート ユニバーサル ヨクック
TEL 0120-39-4929

お取扱店


MTAセメント専用キャリアー

MAP SYSTEM

MICRO - APICAL PLACEMENT

歯科用注入器具 MAPシステム

充填シーンをスマートに

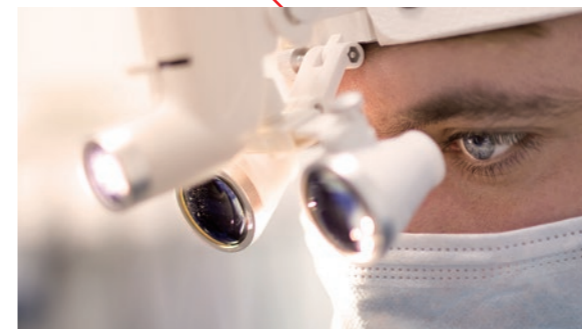

MAP SYSTEMはスイス製のMTAセメント充填用キャリアーです。

スタンダードなクラシックニードル

逆根管充填に適したサージエリーニードル

形状記憶合金によって自由に形状を変えられるNiTiメモリーシェーブニードル2

症例に合わせて形状で充填シーンに応えます



Swiss quality dental products



Classic Needles

クラシックニードルは直接覆髄や歯冠側からの充填に適しています。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm
- #110 Ø1.10mm

適応：

- 覆髄 ■ 穿孔 ■ 根尖閉鎖術



NiTi Memory Shape Needles2

NiTiメモリーシェーブニードル2は形状記憶合金のため、症例に合わせた形状に曲げて使用できます。
オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm
- #110 Ø1.10mm
- #130 Ø1.30mm

適応：

- 覆髄 ■ 穿孔 ■ 根尖閉鎖術
- 逆根管充填 ■ 歯根吸収



Surgery Needles




サージェリーニードルは逆根管充填の際、根尖部への充填に適しています。

サイズ：

- #90 Ø0.90mm (left or right)
- #110 Ø1.10mm (left or right)

適応：


- 逆根管充填 ■ 歯根吸収

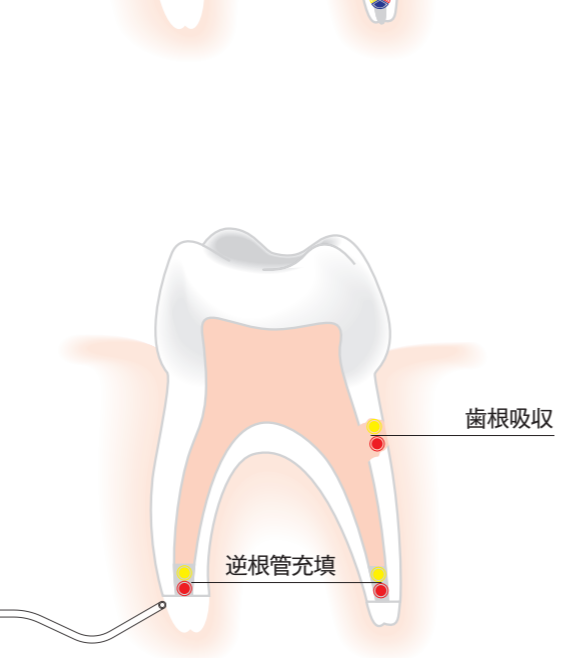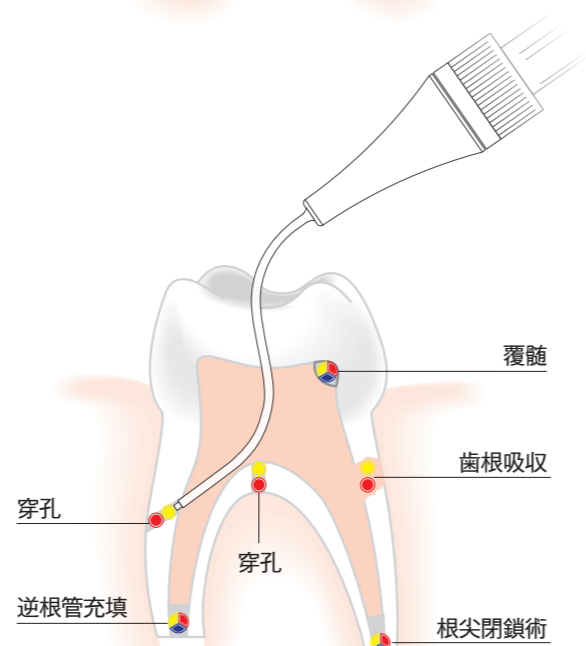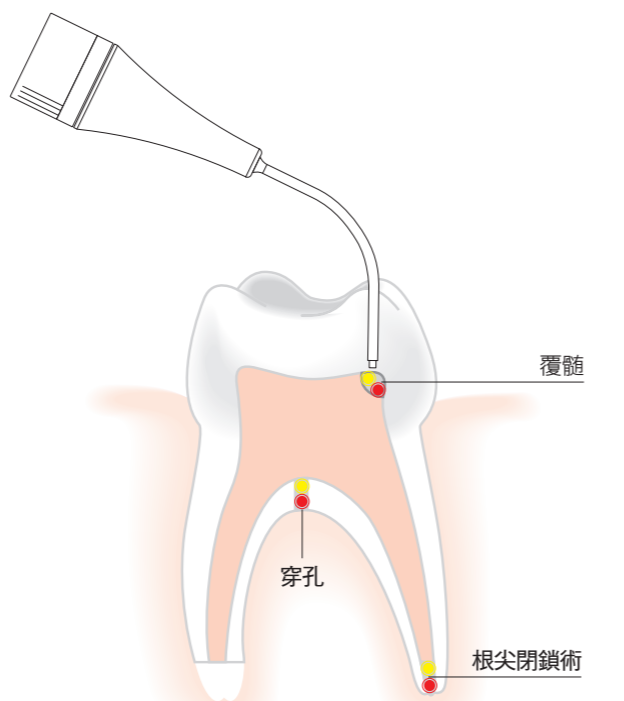

Needles

クラシックニードル Classic Needles

直接覆髄など、歯冠側からの充填に適しています。

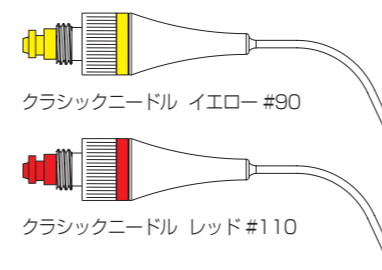


クラシックニードル イエロー #90

クラシックニードル レッド #110

NiTi メモリーシェーブニードル2 NiTi Memory Shape Needles2

形状記憶合金のため、症例に合わせた形状に曲げて使用できます。オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。

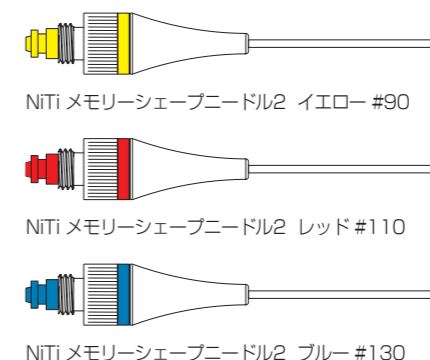


NiTi メモリーシェーブニードル2 イエロー #90

NiTi メモリーシェーブニードル2 レッド #110

NiTi メモリーシェーブニードル2 ブルー #130

サージェリーニードル Surgery Needles

逆根管充填の際、根尖部への充填に適しています。

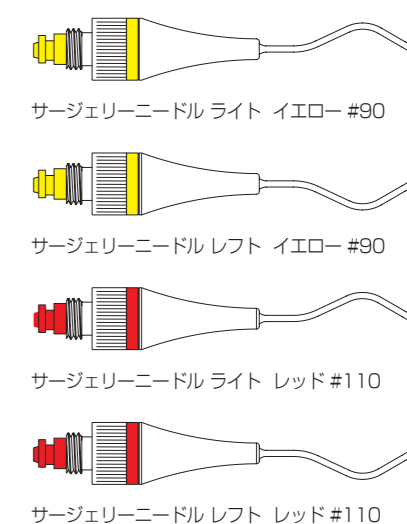

サージェリーニードル ライト イエロー #90

サージェリーニードル レフト イエロー #90

サージェリーニードル ライト レッド #110

サージェリーニードル レフト レッド #110



包装内容 ニードル …………… 1個
プラスチックプランジャー …… 8本
クリーニングキュレット …… 1本

Refills

それぞれのニードルと同じ#のものをご使用ください。

プラスチックプランジャー Plastic Plungers

ニードル内のセメントを押し出すツールです。



プラスチックプランジャー イエロー #90

プラスチックプランジャー レッド #110

プラスチックプランジャー ブルー #130

クリーニングデバイス Cleaning Device

ニードルの外についた余剰なセメントを取り除くツールです。




クリーニングデバイス イエロー #90

クリーニングデバイス レッド #110

クリーニングデバイス ブルー #130

クリーニングキュレット Cleaning Curette

使用後のニードル内を清掃するためのツールです。

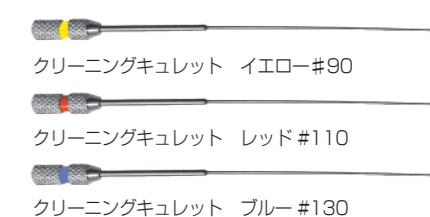

クリーニングキュレット イエロー #90

クリーニングキュレット レッド #110

クリーニングキュレット ブルー #130




滅菌用 アルミニウムケース

Aluminum Sterilization Case

専用ケースはケースごとオートクレーブ滅菌が可能です。

MAPシステム
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号：13B1X10089000986
MAPシステム イントロキット2
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号：13B1X10089001060
MAP ONEシステム
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号：13B1X10089001063
MAPシステム ユニヴァーサルキット
一般医療機器 歯科用注入器具 特管非該当 届出番号：13B1X10089001067

製造販売元(輸入者) (MAPシステム)
MICRO MITECH 株式会社
マイクロテック 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9

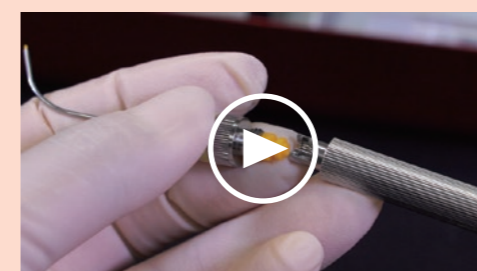

操作説明を動画で

MAPシステムの特徴と操作手順を動画でご説明しています。

