


タテからヨコへの新発想

KZR-CAD HR ブロック2 BG
KZR-CAD HR ブロック3 ガンマシート

New Line up


サイズはそのまま“ヨコ”向きブロック
新サイズ“ヨコ”登場！

2022年
10月発売

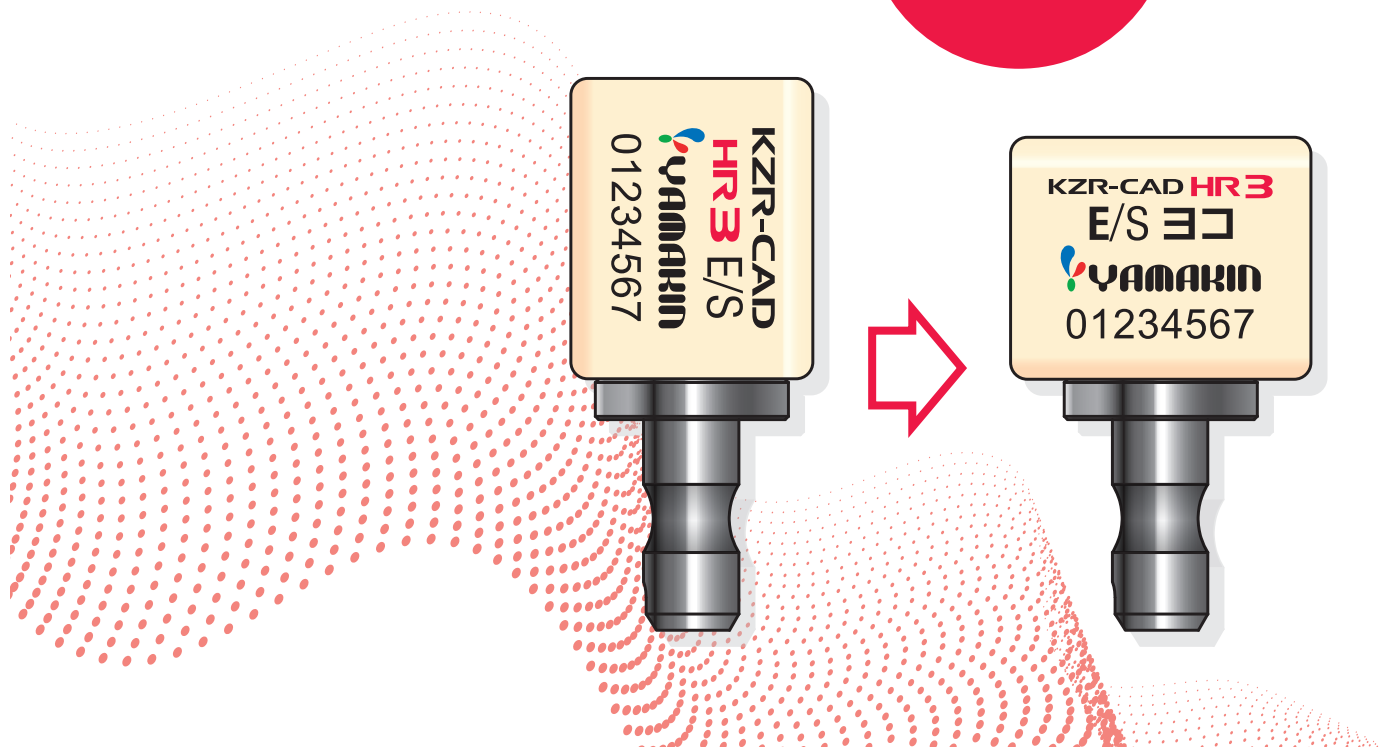

症例にあわせ “タテ”・“ヨコ”を選べる

ワンサイズ大きいブロックを選択しなくてすむ
タテ向き（通常品）で収まらない症例でも、ヨコ向きを使用することで同じサイズのブロックのまま収まるケースがあります。

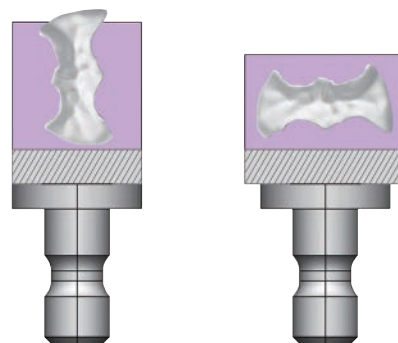

タテ向き（通常品）


ヨコ向き（新サイズ）

※ 斜線部：ミリングバーと治具との干渉防止などの理由から加工物を配置できない領域

“ヨコ”向きブロックという新しい選択肢

ブロックのサイズはそのままに、治具を通常品とは異なる面に取り付けた“ヨコ”向きのブロックを新たにラインアップしました。

今までは、ブロック内に収まらない場合は大きいサイズを選択しなければなりませんでした。ヨコ向きブロックの追加により、症例によってはブロックサイズそのまま収めることができるようになりました。

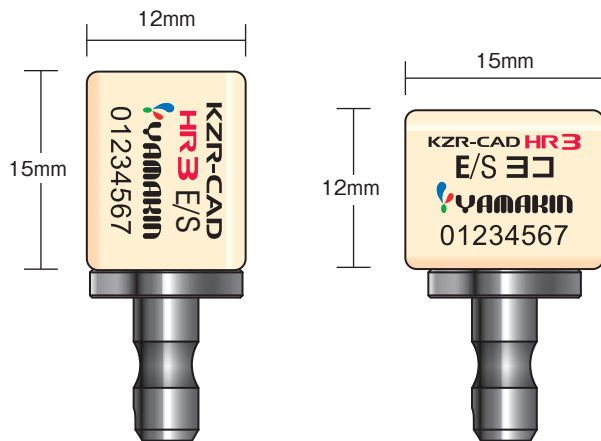

タテ向き (通常品)

ヨコ向き (新サイズ)


横幅が足りないケースに“ヨコ”向きブロック

細いサポートピンを複数付与することで、コンタクトやマージン部の形態への影響を抑えられ、加工後のサポートピンの除去と調整がしやすくなります。

ヨコ向きブロックであれば、ブロック内に収めやすくなります。また、ヨコ向きブロックは、ノブを付与するテクニックにも有効です。



サポートピンの複数付与イメージ

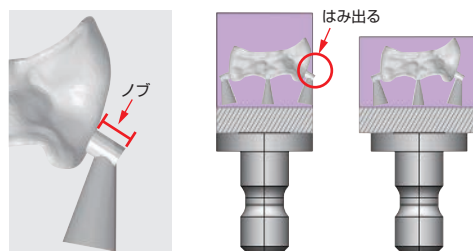

ノブ付与イメージ

【一般財団法人ヤマキン学術文化振興財団 発行】

▶ サポートピンの複数付与、ノブの付与について詳しく紹介



知っておきたい CAD/CAMインレーのポイント②

タテからヨコへの新発想

CAD/CAMインレー加工に適した「横向きブロック」とサポートピン配置テクニックの紹介

ご購入の方は弊社営業担当者にお申し付けください

ラインアップ

KZR-CAD HR 2 BG 保険適用

KZR-CAD HR ブロック2 BG

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ)
KZR-CAD HR ブロック2 BG y
認証番号 304AKBZX00009000

5個入 単色	Sヨコサイズ
	1inch
Eシェード	12,020円


KZR-CAD HR 3 GAMMATHETA 保険適用

KZR-CAD HR ブロック3 ガンマシート

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
CAD/CAM冠用材料 (Ⅲ)
KZR-CAD HR ブロック3 ガンマシート z
認証番号 303AKBZX00111000

5個入 単色	Sヨコサイズ
	1inch
Eシェード	20,280円

ブロックサイズ

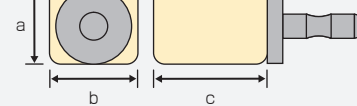

(単位: mm)

サイズ	a	b	c
Sヨコ	10	15	12

※ご使用されるCAMソフトウェアでヨコ向きブロックが対応可能かについては各メーカーにお問い合わせください。

製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格 (税抜き) です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

製品に関するお問い合わせ (9:00~17:00)
テクニカルサポート サンキュー ヨクック
☎ 0120-39-4929

お取扱店